


DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE EN MICROBILLE





POSTURA

- Gamme d'aides techniques à la posture en microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie dotées d'un traitement d'ignifugation
- Housse CIC soudée avec un traitement aux ions Argent (Ag+) 
- Large choix de formes pour répondre à tous les besoins

POUR UNE GESTION DURABLE DES RISQUES

- ▶ Soudures aux Ultrasons pour éviter la pénétration des liquides.
- ▶ Ions argent Ag+ contre le développement des micro-organismes.
- ▶ Enduction du PU-Polycarbonate sur maille Polyamide pour une durabilité supérieure.
- ▶ Certifié Oeko-Tex classe 1 pour un contact direct avec la peau.
- ▶ Microbilles en PES auto-extinguible pour sécuriser l'usage au lit des produits.
- ▶ Principe Vacuum Touch™ pour une répartition stable des microbilles dans leurs protections.

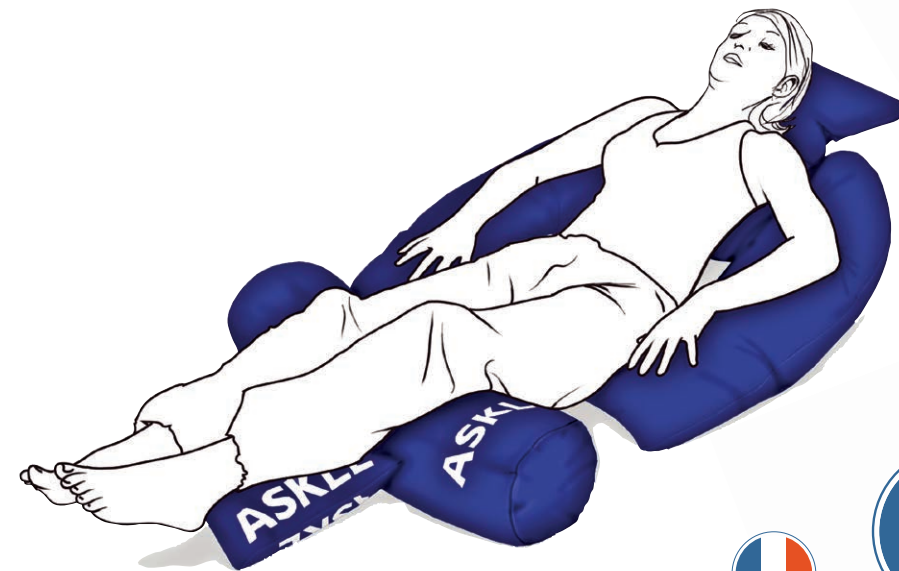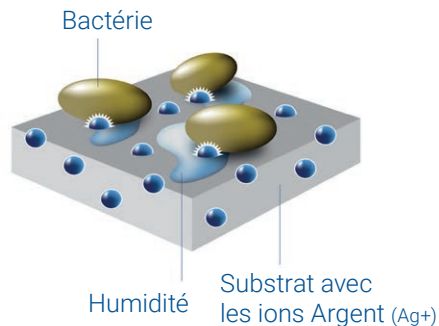



ASKLÉ
Total Protection Ag++

ASKLÉ
Total Protection Ag++


ASKLÉ
Total Protection Ag++

ASKLÉ
Total Protection Ag++



NOTRE SOLUTION POUR UN POSITIONNEMENT TENANT COMPTE DU PATIENT ET DU SOIGNANT

ZONE TROCHANTÉRIENNE

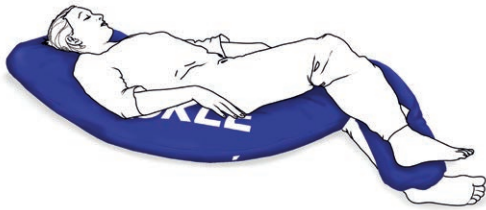

POSITIONNEMENT LATÉRAL À 30°


VCP08CIC - VCP11CIC

Pour la prévention des escarres trochantériennes, les experts recommandent la position latérale décubitus à 30°.

- 2 tailles disponibles pour s'adapter à la taille du patient :
pour patients > 165 cm (réf. VCP08CIC)
pour patients < 165 cm (réf. VCP11CIC)
- Oreiller intégré pour offrir un meilleur confort
- Installation facile et sans effort
- Stable et tenue longue durée



ZONES DU COUDE ET DU TALON

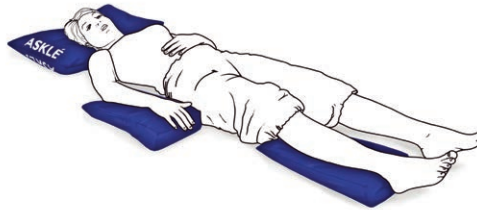

POUR LES COUDES ET LES TALONS

VCP05CIC - VCP06CIC - VCP03CIC

- Inclinaison modérée pour préserver la circulation sanguine
- Coussin à bords lisses pour limiter les points de pression localisés
- Décharge de la pression autour du talon d'Achille et des chevilles et dans la région du coude



ZONE MEMBRES INFÉRIEURS



POUR LES HANCHES ET GENOUX

VCP07CIC - VCP04CIC

Coussin cylindrique placé sous les genoux (réf. VCP04CIC).


- Réduit les douleurs dans la zone lombaire

Coussin d'abduction pour les hanches (réf. VCP07CIC).

- Recommandé pour le traitement post-opératoire des prothèses de hanche
- Réduit le risque de luxation une fois le patient rétabli



ZONE DU SACRUM, DES ISCHIIONS ET DES TALONS

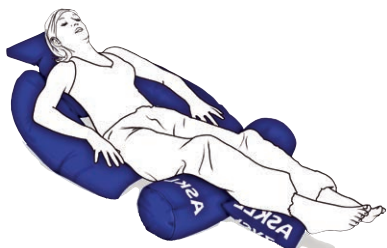

POSITIONNEMENT SEMI-FOWLER

VCP09CIC - VCP02CIC - VCP03CIC - VCP04CIC

Les experts recommandent une position assise aussi connue sous le nom de position semi-fowler pour décharger les zones ischiatiques et talonnières et réduire le cisaillement de la peau et les frictions causées par le glissement vers l'avant.

- Réduction du « glissé avant » responsable du cisaillement des tissus
- Limite le risque de chute
- Alternative aux utilisations de lits non médicalisés
- Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes



PREVENTION DES POSITIONS VICIEUSES DES HANCHES ET DES GENOUX




POUR LES CHEVILLES ET LES GENOUX

VCP12CIC - VCP01CIC - VCP04CIC

Pour la prévention des escarres au niveau des chevilles (mal-léole) et du genou (condyle), les experts recommandent l'élévation des membres inférieurs pour réduire la pression sur la zone malléole et du genou.

- Maintenir les membres inférieurs en élévation
- Réduction des points de contact entre les genoux

Le coussin cylindrique (réf. VCP04CIC et VCP12CIC).
Le coussin d'abduction des genoux (réf. VCP01CIC).

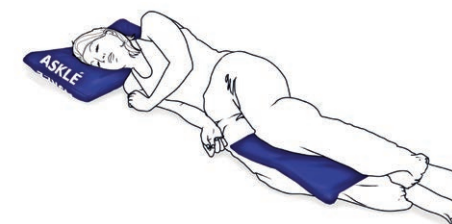

PETITS ET MOYENS (T1 ET T2) TOUT USAGE

VCP02CIC - VCP03CIC

- Adapté aux soins de tout genre (utilisé seul ou en combinaison avec tout autre coussin de positionnement)
- Remplace les coussins habituels pour éviter le risque de contamination croisée
- Installation ou retournement facilité pendant les procédures de soins

Les coussins universels T1 et T2 peuvent être utilisés au quotidien par les professionnels de santé pour répondre à différents besoins (réf. VCP02CIC et VCP03CIC).



COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, **STANDARD**, DES HANCHES ET DES GENOUX. POUR PATIENTS POLYHANDICAPÉS EN POSITION ALLONGÉE.



Pour patient taille < 165 cm (réf. VCP11CIC)
et > 165 cm (réf. VCP08CIC)

Coussin de positionnement semi-latérale à 30° en station allongée. Il permet de réduire la pression d'appui au niveau de la région sacrée et sous trochantérienne.



Coussin d'abduction des hanches (réf. VCP07CIC)

Indiqué en phase post-opératoire de prothèse de hanche, ce coussin permet de prévenir les positions vicieuses de hanches et limiter le risque de luxation d'une prothèse totale de hanche lors des retournements des patients. Il se positionne au niveau de l'entre-jambe du patient.



Coussin décubitus latéral ½ lune (réf. VCP09CIC)

Ce coussin permet de prévenir la constitution d'escarre au niveau de la région sacrée, ischiatique et talonnière.

PRESCRIPTION

Un coussin de positionnement standard doit être prescrit seul



173,79€ sans PLV
- CODE 6229732 -

Mardi 12 Mai 2020

Docteur Lorem IPSUM
134 Euphratensis discrevimus
34850 Samosata-dictum
Tél + 31 (0)7 85 02 10 64
Lorem-ipsum@Lorem Ipsum.fr

Mardi 12 Mai 2020

L'état de santé de M. ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin de positionnement, **STANDARD** des hanches et des genoux pour un usage en position allongée.

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, **MODULAIRE**, DES HANCHES ET DES GENOUX, **BASE**. POUR PATIENTS POLYHANDICAPÉS EN POSITION ALLONGÉE.



Coussins universels 1 et 2 (réf. VCP02CIC et VCP03CIC)

Ces coussins permettent de prévenir les positions vicieuses de hanches et genoux. Ils limitent les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protègent les malléoles ou permettent de créer une décharge talonnière, ou caler le patient en position de décubitus latéral.



Coussin cylindrique (réf. VCP04CIC)

Ce coussin permet de prévenir les positions vicieuses des genoux. Placé sous les genoux, le coussin cylindrique réduit le creux lombaire et soulage les douleurs d'origine facettaire.

Associé à un coussin de forme circulaire (VCP12CIC), il maintient les membres inférieurs en abduction. Il assure une protection des points de contact des genoux et réduit l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux.

PRESCRIPTION

Un coussin de positionnement base doit être prescrit avec au moins un plot (code lpp 6229755) et jusqu'à 4 plots maximum



129,58€ sans PLV
- CODE 6229749 -

Mardi 12 Mai 2020

Docteur Lorem IPSUM
134 Euphratensis discrevimus
34850 Samosata-dictum
Tél + 31 (0)7 85 02 10 64
Lorem-ipsum@Lorem Ipsum.fr

L'état de santé de M. ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin de positionnement, **MODULAIRE** des hanches et des genoux, bas e et d'un coussin de positionnement **MODULAIRE** des hanches et des genoux, plot pour un usage en position allongée.

Mardi 12 Mai 2020

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, **MODULAIRE**, DES HANCHES ET DES GENOUX, **PLOT(S)**. POUR PATIENTS POLYHANDICAPÉS EN POSITION ALLONGÉE.



Coussin abduction des genoux (réf. VCP01CIC)

Ce coussin d'abduction des genoux permet de prévenir la constitution d'escarres au niveau des malléoles et de genoux.



Coussin de forme circulaire (réf. VCP12CIC)

Associé à un coussin cylindrique (VCP04CIC), il maintient les membres inférieurs en abduction. Il assure une protection des points de contact des genoux et réduit l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux.



Coussins de positionnement pied (réf. VCP05CIC)

Ce coussin permet d'assurer le calage de la position avec un modulaire base et de prévenir la constitution d'escarres au niveau des talons pour la mise en décharge totale des talons en décubitus dorsal. L'inclinaison du coussin favorise le retour veineux.

PRESCRIPTION

Le(s) coussin(s) de positionnement plot(s) doivent être prescrits avec un coussin modulaire, base, (code lpp 6229749), et jusqu'à 4 plots maximum par prescription

Mardi 12 Mai 2020

Docteur Lorem IPSUM
134 Euphratisis disreivimus
34850 Samosata-dictum
Tél + 31 (0)7 85 02 10 64
Lorem-ipsu@Lorem ipsu.fr

L'état de santé de M. ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, plot et d'un coussin de positionnement **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, base pour un usage en position allongée.



41,16€ sans PLV
- CODE 6229755 -

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	POIDS (KG)	DIMENSIONS (CM)
	Cale de positionnement latéral 30°	VCP08CIC	2,20	182 x 54
		VCP11CIC	2,00	170 x 74
	Cale de positionnement d'abduction des Hanches	VCP07CIC	0,43	35 x 28
	Cale de positionnement 1/2 lune	VCP09CIC	1,9	137 x 80
	Cale de positionnement Universel 1	VCP02CIC	0,23	37 x 26
	Cale de positionnement Universel 2	VCP03CIC	0,58	56 x 40
	Cale de positionnement Base cylindrique	VCP04CIC	0,64	Ø 21 x 60
	Cale de positionnement 1/2 bouée Plot d'abduction des genoux	VCP01CIC	0,36	60 x 35
	Cale de positionnement modulaire de forme circulaire	VCP12CIC	0,50	46 x 46
	Plot de Positionnement Pied	VCP05CIC	0,23	39 x 21
	Plot de Positionnement Main	VCP06CIC	0,23	39 x 21
	Sac de Transport	VCP10	0,65	80 x 90

ENTRETIEN/ DESINFECTION : DISPOSITIF TOTAL PROTECTION AG+

100% Promust CIC : 58% Polyester - 35% polyuréthane polycarbonate - 8% autres.



WINNCARE FRANCE - 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes | Dispositifs médicaux de classe 1

